


dexcomG6

START HIER

Instelling

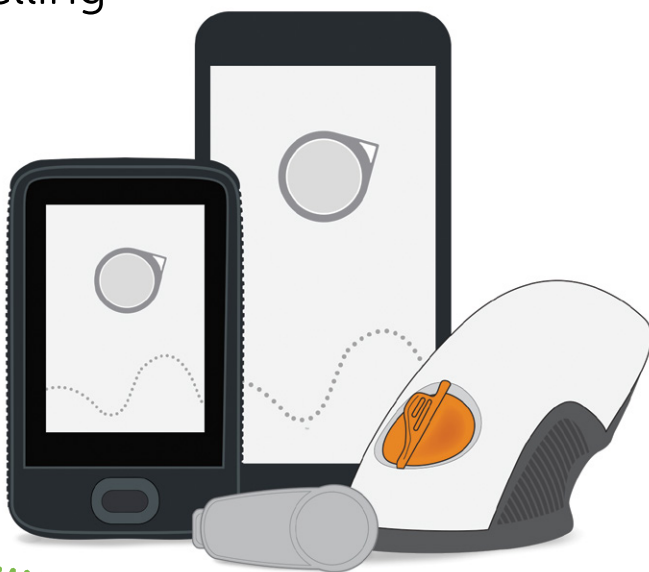

Gebruiksaanwijzing

Overzicht Dexcom G6 CGM (G6)


Weergaveapparaat

- Toont glucose-informatie
- Stel uw mobiele apparaat, Dexcom ontvanger of beide in
- Ga voor een lijst van huidige compatibele mobiele apparaten en besturingssystemen naar: dexcom.com/compatibility
- De G6 app en ontvanger zijn compatibel met alle G6 systemen

Uw mobiele apparaat




Dexcom ontvanger

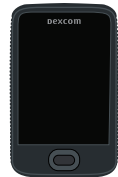


Applicator met ingebouwde sensor

- Sensorapplicator brengt sensor onder uw huid aan
- Sensor ontvangt glucose-informatie

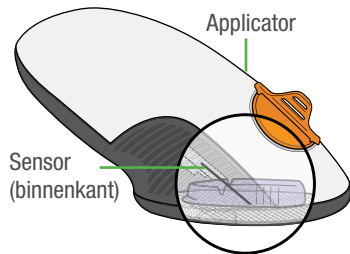

Zender

- Zendt glucose-informatie van sensor naar weergaveapparaat

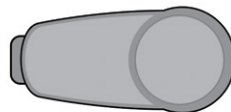

Alle afbeeldingen zijn slechts als voorbeeld bedoeld. Uw product kan er anders uitzien.

Bekijk opnieuw de veiligheidsverklaring in *Uw G6 gebruiken, Hoofdstuk 2* voordat u uw G6 gebruikt.

Wat hij doet

De G6 zendt G6-sensorglucosemetingen (G6-metingen) naar uw weergaveapparaat.



Kies app, ontvanger of beide

De ontvanger is een medisch apparaat. Uw mobiel apparaat is dat niet, hoewel de G6 app er wel op werkt. Uw mobiel apparaat is geen medisch apparaat. De app kan een alarm/waarschuwing missen omdat het op een mobiel apparaat is dat bijvoorbeeld instellingen van een mobiel apparaat heeft, de app of het mobiel apparaat kan uitschakelen, lege batterij, enz.

Gebruik onderstaande tabbladen om de app, ontvanger of beide in te stellen

Wilt u beide instellen? Kies er één om eerst in te stellen en ga naar dat tabblad. De laatste stap toont hoe u het tweede weergaveapparaat instelt. Gebruik niet beide tabbladen.

Voor andere manieren om te leren hoe u uw G6 instelt:


- Bekijk de zelfstudie op dexcom.com/downloadsandguides
- Neem contact op met uw lokale Dexcom-vertegenwoordiger voor ondersteuning




Uw mobiele apparaat




Dexcom ontvanger

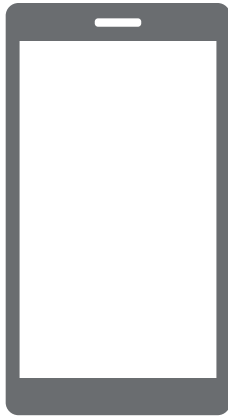

Uw mobiele apparaat

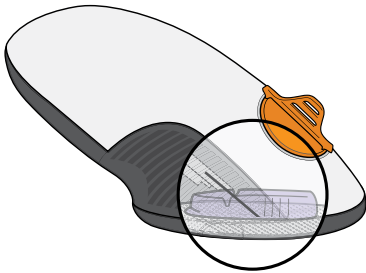

Applicator met
ingebouwde sensor

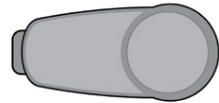

Zender

Stap 1: App instellen


A Download en open de Dexcom G6-app




B Volg de instructies op het scherm voor het instellen van de app

1 Wanneer u hierom wordt gevraagd:

- Stuur uw gegevens naar de cloud.
Hiermee kunt u het volgende gebruiken:
 - Share: Stuur uw G6-gegevens naar volgers.
 - CLARITY: Delen van gegevens met artsen; ontdek patronen (mogelijk niet in alle regio's beschikbaar).
- Voer uw sensorcode in
(van de sensorapplicator die u gaat plaatsen).
 - Geen sensorcode?
Zie Uw G6 gebruiken, Bijlage A Probleemoplossing.

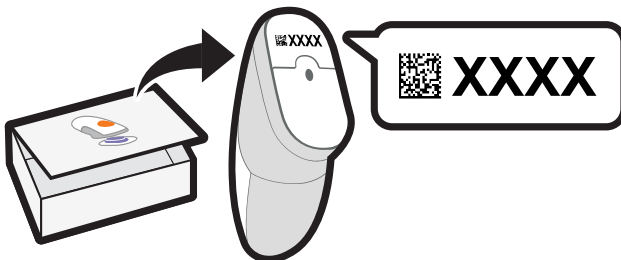

- Voer uw serienummer (SN) in van:

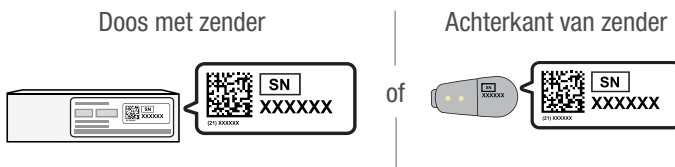

Na het invoeren van uw SN, zoekt uw G6 de zender. Tijdens het zoeken krijgt u geen G6-metingen of alarm/waarschuwingen.

- 2** Ziet u de blauwe timer van de warming-up van de sensor? Dit betekent dat uw sensor gewend raakt aan uw lichaam.


Tijdens warming-up:

- Ontvangt u geen G6-metingen of alarm/waarschuwingen
- Houdt u het mobiele apparaat steeds binnen 6 meter van de zender zodat de verbinding niet verbroken wordt



C Wacht 2 uur


- Wanneer de warming-up van de sensor voltooid is, tikt u op **OK** om het beginscherm te zien
- Nu ontvangt u G6-metingen en alarmen/waarschuwingen

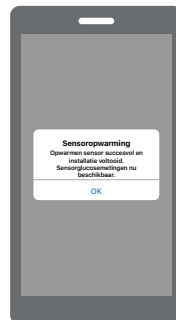

Stap 2: Zie Uw G6 gebruiken

Leer hoe u het volgende moet doen:

- Uw beginscherm lezen
- Instellen van alarmen en waarschuwingen
- Behandelbeslissingen nemen
- Problemen oplossen

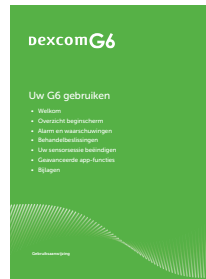


Stap 3: Optioneel – Ontvanger instellen


Schakel de ontvanger in door de aan/uit-knop 2-3 seconden in te drukken. Volg vervolgens de instructies op het scherm.

Gebruik niet het tabblad Ontvanger instellen. Die stappen zijn voor het instellen van de ontvanger voordat u de app instelt.




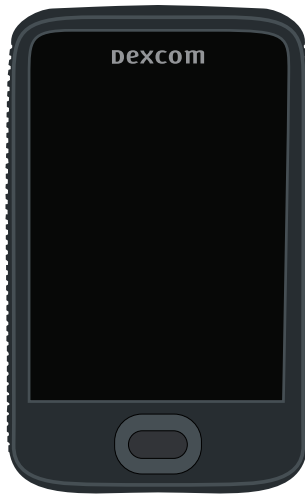

Ontvanger

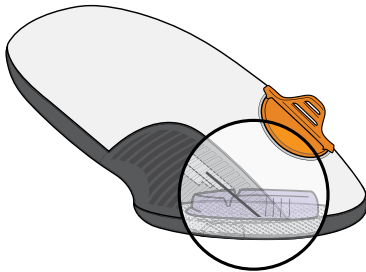

Applicator met
ingebouwde sensor

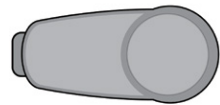

Zender

Ontvanger instellen

Stap 1: Ontvanger instellen

A Neem de ontvanger uit de doos




B Zet de ontvanger aan

Druk gedurende 2-3 seconden op de aan/uit-knop.




C Volg de instructies op het scherm

- 1 Wanneer u hierom wordt gevraagd, voert u in:
 - Sensorcode van de sensorapplicator die u gaat plaatsen
 - Geen sensorcode?
Zie Uw G6 gebruiken, Bijlage A Probleemoplossing.

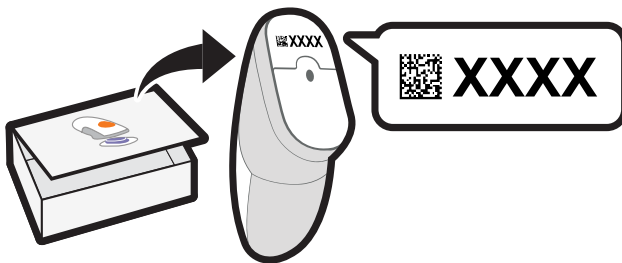


- Serienummer (SN) van:

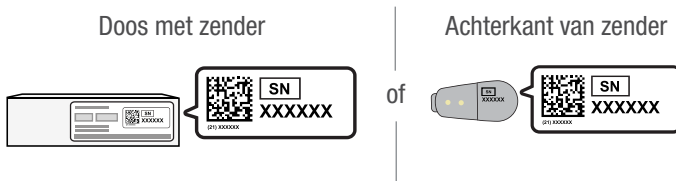

Na het invoeren van uw SN, zoekt uw G6 de zender. Tijdens het zoeken krijgt u geen G6-metingen of alarmen/waarschuwingen.


- 2** Als u klaar bent met deze stap, ziet u dit scherm:

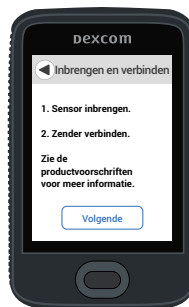

Stap 2: Applicator gebruiken om ingebouwde sensor aan te brengen

A Neem de applicator met ingebouwde sensor uit de doos met de sensor

Verzamel materialen: applicator (met code die u heeft ingevoerd), zender en doekjes.

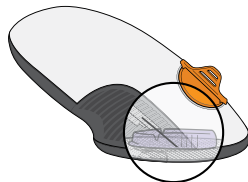


B Kies plaats voor de sensor

2 jaar en ouder

OF


uitsluitend voor 2-17 jaar

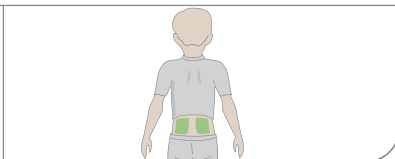


Vermijd botten, geïrriteerde huid, tatoeages en plaatsen waar u zich gemakkelijk stoot.

C Gebruik de applicator om de ingebouwde sensor aan te brengen


1 Neem sensorapplicator en een alcoholdoekje.

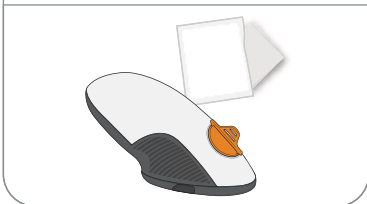


2 Was en droog uw handen.

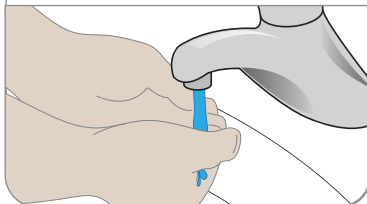


3 Reinig de sensorplaats met een alcoholdoekje.

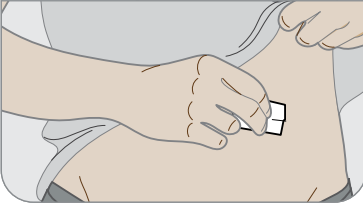


4 Verwijder de zelfklevende strippen. Raak het kleefmiddel niet aan.

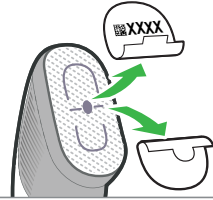


5 Plaats applicator op de huid.

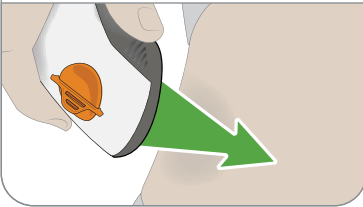


6 Buig en breek het beschermkapje.

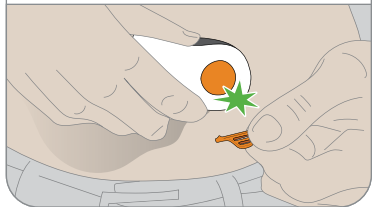


7 Druk op de knop om de sensor aan te brengen.

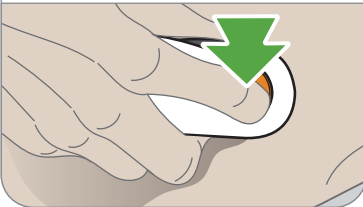

8 Verwijder de applicator van de huid en laat de pleister en houder zitten.

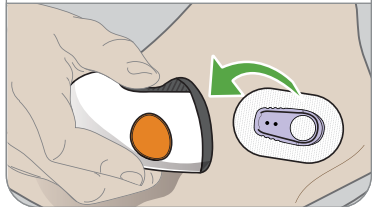


9 Gooi de applicator weg. Volg plaatselijke richtlijnen voor bloedcontact-componenten.

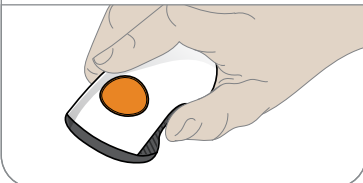


Stap 3: Zender bevestigen

A Neem de zender uit de doos

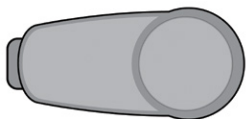


B Klik de zender vast


- 1** Reinig de zender met een alcoholdoekje.

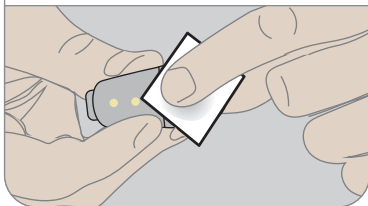


- 2** Plaats de zender, met de lip eerst, in de houder.

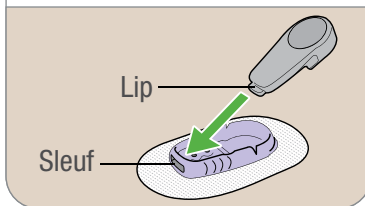

- 3** Klik de zender vast. Hij klikt op zijn plaats. Zorg ervoor dat het vlak is en goed in de houder zit.

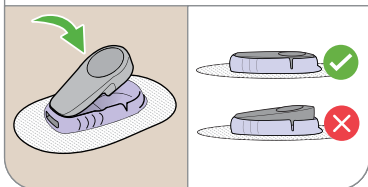

- 4** Wrijf 3 maal rondom de patch.

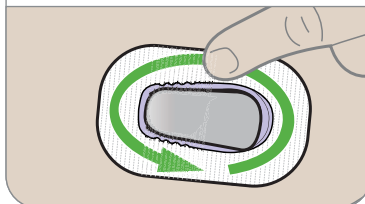

Stap 4: Sensor op ontvanger starten

A Wacht op het koppelen, let op dit kan tot 30 minuten duren.


Tijdens het koppelen:

- Ontvangt u geen G6-metingen of alarmen/ waarschuwingen
- Houdt u de ontvanger altijd binnen 6 meter van de zender zodat de verbinding niet verbroken wordt



B Tik op Start Sensor om de sensor warming-up te starten

Tijdens warming-up krijgt u geen G6-metingen of alarm/waarschuwingen

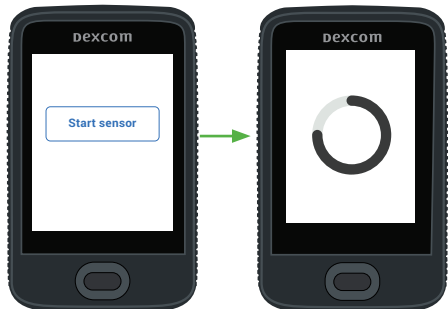

C Wacht


- Klik hierna op **Volgende** om naar beginscherm te gaan
- Nu ontvangt u G6-metingen en alarm/waarschuwingen



Stap 5: Zie Uw G6 gebruiken

Leer hoe u het volgende moet doen:

- Uw beginscherm lezen
- Instellen van alarmen en waarschuwingen
- Behandelbeslissingen nemen
- Problemen oplossen

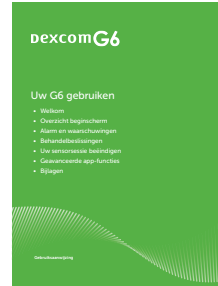

Stap 6: Optioneel – App instellen

Download de app op uw mobiel apparaat en open deze. Volg daarna de instructies op het scherm.

Gebruik niet het tabblad App instellen. Die stappen zijn voor het instellen van de app voordat u de ontvanger instelt.



Dexcom

© 2021 Dexcom, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Gedekt door patenten dexcom.com/patents.

Dexcom, Dexcom Share, Dexcom Care, Dexcom CLARITY, en Share zijn geregistreerde handelsmerken van Dexcom, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Dexcom



Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA

+1.858.200.0200
dexcom.com

Buiten VS: Neem contact op met
uw lokale Dexcom vertegenwoordiger.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

